

# Troop Elevation Pillow: Instruktioner för användning och underhåll

## Beskrivning

Troop Elevation Pillow är ett positionshjälpmedel i skum som är särskilt utformad för att förbättra luftvägshandlingen och säkerheten när narkosläkare tar hand om överviktiga och sjukligt överviktiga patienter. Systemet används för att snabbt höja patientens huvud (H.E.L.P-position) för att luftvägsaxlarna ska börja anpassa sig så att den överviktiga patienten har lättare att andas vid syretillförsel eller spontant under regional- / lokal- eller blockbedövning.

## Bruk

**Avsedda Användare:** Utbildad medicinsk personal för hantering av luftvägar.

1) Placera Troop Elevation Pillow (TEP) på huvudändan av operationsbordet och täck över TEP med ett **ogenomträngligt kirurgiskt underlag eller barriärmaterial**; (överdraget ger ökad komfort för patienten och hjälper till att hålla kudden ren. Överdraget fungerar i **infektionsbekämpande syfte**.) **Placera en vanlig intubationskudde eller ringformad kudde på den övre plattan / överdelen på TEP.** Huvudstödet ska täckas med en kirurghandduk eller -mössa. Placera ett ark "korsvis" under Elevation Pillow. Om patienten måste flyttas längre ned på operationsbordet när patienten är intuberad (till exempel till litotomiposition), genom att lyfta med underlaget, kan Troop Elevation Pillow och patienten flyttas tillsammans vilket innebär att patienten förblir i samma upphöjda position (H.E.L.P.).

2) Luta operationsbordet ~ 5-10 grader bakåt  
(Patienten kan sedan överföras från baren till operationsbordet på en "plan nivå".)

3) Patientens axlar ska befinna sig på den övre utbuktningen på **Troop Elevation Pillow.** Patientens huvud ska befinna sig på den vanliga intubationskudden vid Troop Elevation Pillows överkant.

4) När patienten ligger på operationsbordet och **Troop Elevation Pillow & den vanliga intubationskudden,** ska operationsbordet lyftas upp ~ 5-10 grader efter behov.

5) "Bygg upp" armstöden med skum och / eller vikta filter eller placera de **upphöjda (vinyltäckta) armstödsdynorna (säljs separat).**

6) **Placera en 'vanlig' sjukhuskudde under patientens knän.**

**FÖRSIKTIGHET:** Om operationen ska utföras med huvudet vinklat nedåt, rekommenderas att Elevation Pillow **avlägsnas** efter intubering. På liknande sätt kan användning av TEP utan luftvägsingrepp kräva ytterligare justeringar av operationsbordet.



**Troop Elevation Pillow / Installationsanvisningar**

(Avsedd för användning med en vanlig intubationskudde)


(Placera ett ark "korsvis" under Elevation Pillow (TEP); vi behov kommer detta innebära att man kan flytta patienten tillsammans med TEP)



(Vinkla operationsbordet något nedåt... underlättar överföring av patienten; efter överföring ska ryggen rätas upp för att uppnå **HELP-positionen**)

(Placera en "vanlig" kudde under patientens knän)

**Placera en kirurgisk barriär för engångsbruk över Elevation Pillow i vinyl**

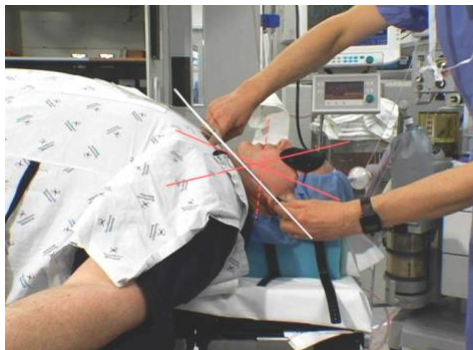

***Patient med sjuklig fetma: från helt liggande till upphöjt huvud... (HELP)***

(Se instruktionsvideon på webbplatsen... [www.troopelevationpillow.com](http://www.troopelevationpillow.com)) Rev. januari, 2019

## Underhåll

### Rengöringsinstruktioner:

**Virex, Fantastik eller Formula 409** är de rekommenderade rengöringsmedlen Troop Elevation Pillow med tillbehör. Samtliga positionshjälpmedel måste rengöras efter varje användning.

1. Avlägsna den kirurgisk barriären för engångsbruk från Troop Elevation Pillow och hantera den som kliniskt avfall.
2. Applicera rikligt med rengöringsvätska ovanpå, på sidorna och under Elevation Pillow och torka med en ren luddfri trasa. Använd en ren trasa fuktad med vatten för att torka av rengöringslösningen. Använd sedan ytterligare en ren trasa för att torka av eventuella återstående rester.
3. Placera Troop Elevation Pillow så att den kan lufttorka ordentligt.
4. Upprepa rengöringsproceduren för huvudstödet, Troop Addition och armstödsdynorna om även de har använts.

En rengöringslösning med väteperoxid som Virex kan missfärga vinylen eller (över tid) förändra hur vinylen "känns". Vi rekommenderar inte att våra produkter maskintvättas, torktumlas, steriliseras med gas eller autoklaveras. Våra positionshjälpmedel ska aldrig blötläggas i rengöringslösning eftersom det allvarligt kan äventyra produktens integritet.

### Förvaring och hantering:

Följande förvaringsmiljö rekommenderas för att bibehålla Troop Pillow-produkternas integritet för att undvika att ytan luckras upp, bildar sprickor eller andra fel:

Värme: Förvaringstemperaturen ska var mellan 4 och 25 grader Celsius. Direktkontakt med värmekällor bör undvikas.

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet i förvaringslokalen ska vara mellan 30% och 70%. Mycket fuktiga eller mycket torra förhållanden bör undvikas.

Ljus: Det är bäst att undvika exponering för direkt solljus under längre perioder. Våra produkter är utformade för användning i normala inomhusmiljöer.

Undvik kontakt med vassa kanter eller ytor som kan punktera, riva, skära eller klämma på positionshjälpmedlet. Hantera positionshjälpmedlen varsamt för att undvika skador.

### Avfallshantering:

Troop Elevation Pillow-produkterna innehåller inte några medicinska ämnen. Positionshjälpmedlen i vinyl ska hanteras som allmänt medicinskt avfall. Kirurgiska barriärer ska hanteras som kliniskt avfall och kan antingen värmebehandlas eller förbrännas.

## Konstruktion

Materialet är en vinylyta med polyestersubstrat och polyuretanskum.

### Brandsäkerhet:

Allt material överensstämmer med brandsäkerhetsreglerna: State of California Department of Consumer Affairs Technical Bulletin # 117-2013 och TB129. Detta inkluderar alla överdrag samt skumfyllningen. Allt material överensstämmer med The Boston Fire Code Flammability Requirements.

Vinylöverdraget har behandlats med antimikrobiellt skydd och är mögelbeständigt. Alla material är antistatiska, latexfria och ftalatfria.

## Garanti:

Produkten garanteras vara fri från defekta material eller utförande vid inköpstillfället och kan användas i två år, med undantag för missbruk, oaksamhet eller underlåtenhet att följa anvisningarna för underhåll och användning. En kirurgiskt barriär för engångsbruk måste användas för att skydda Troop Elevation Pillow och Addition vid varje användningstillfälle för att garantin ska vara giltig.

Bone Foam, Inc. förbehåller sig rätten att avgöra om en dyna kan repareras och huruvida den har missbrukats eller använts oaksamt. Kunden betalar för returfrakt. Inköpsbevis krävs för alla garantianspråk. Alla specifika garantifrågor och allvarliga serviceincidenter ska riktas till Bone Foam, Inc. i Corcoran, Minnesota: +1 763-559-1830, och den auktoriserade myndigheten i det land där användaren bor.

**Varningar och försiktighetsåtgärder:** För att förhindra skada ska alla delar av Troop Elevation Pillow (TEP) placeras säkert på sjukhussängen. Användaren instrueras att placera den förformade barriären eller det ogenomträngliga kirurgiska överdraget över TEP. Linda aldrig in TEP i plast vid användning på patient. Avbryt användningen vid tecken på bristande material.



Bone Foam, Inc.  
20175 County Road 50, Corcoran, MN  
55340 USA  
Phone: 763-559-1830 Fax: 763-559-1822  
[www.troopelevationpillow.com](http://www.troopelevationpillow.com)  
[www.bonefoam.com](http://www.bonefoam.com)



mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71  
D-30855 Hannover-Langenhagen  
Fax: +49-511-3908 9539  
Telefon: +49-511-3908 9530

Lärarwebbplats: [www.troopelevationpillow.com](http://www.troopelevationpillow.com)

**Tillverkade i USA**



" Inte tillverkad med naturgummilatex "

Symboler som används på etiketter:

Symbol	Symbolref-nr.	Symbolens titel	Symbolbeskrivning
	5.1.1	Tillverkare	Anger tillverkaren av medicintekniska produkter enligt definitionen i EU MDR 2017/745.
	5.1.2	Godkänd representant i Europeiska gemenskapen	Anger det behöriga ombudet i Europeiska gemenskapen.
	5.1.3	Tillverkningsdatum	Anger det datum då den medicintekniska produkten tillverkades.
	5.1.5	Satskod	Anger tillverkarens satskod så att partiet eller partiet kan identifieras.
	5.1.6	Katalognummer	Anger tillverkarens katalognummer så att den medicintekniska produkten kan identifieras.
	5.2.7	Icke-steril	Anger en medicinteknisk produkt som inte har steriliserats.
	5.3.2	Håll borta från solljus	Indikerar en medicinsk anordning som behöver skyddas från ljuskällor.
	5.3.7	Temperaturgräns	Anger de temperaturgränser mellan vilka den medicinska anordningen kan utsättas för temperaturen utan fara.
	5.3.8	Fuktighetsbegränsning	Anger fuktighetsområdet inom vilken den medicinska anordningen säkert kan utsättas för fuktigheten utan fara.
	5.4.3	Se bruksanvisningen eller Se elektronisk bruksanvisning	Anger att användaren måste läsa bruksanvisningen.
	5.7.7	Medicinsk anordning	Anger att objektet är en <i>medicinteknisk produkt</i> .